

Armoire murale pour DAE Défibrillateur Automatisé Externe

AIVIA 100

Présentation

Alliant robustesse et légèreté l'AIVIA est composée de deux parties distinctes :

- le capot en polycarbonate
- le support en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques de résistance aux chocs étonnantes.

Le polycarbonate est utilisé pour les phares des véhicules et l'ABS pour les pare-chocs.

Signalétique

En face avant figurent la chaîne de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Sur les cotés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur (cœur brisé par un arc électrique).



AIVIA 100

Fonctionnalités

Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection automatique de luminosité.

L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés.

L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (leds rouges clignotantes).



L'alarme sonore (80 dB) est en option.

Positionnement

Alimenté par piles, l'AIVIA 100 (4 x LR20 livrées) est exclusivement prévu pour un usage INTERIEUR en raison de l'impossibilité d'y adjoindre un système de chauffage.

Dimensions :

H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, Poids = 3,5 kg

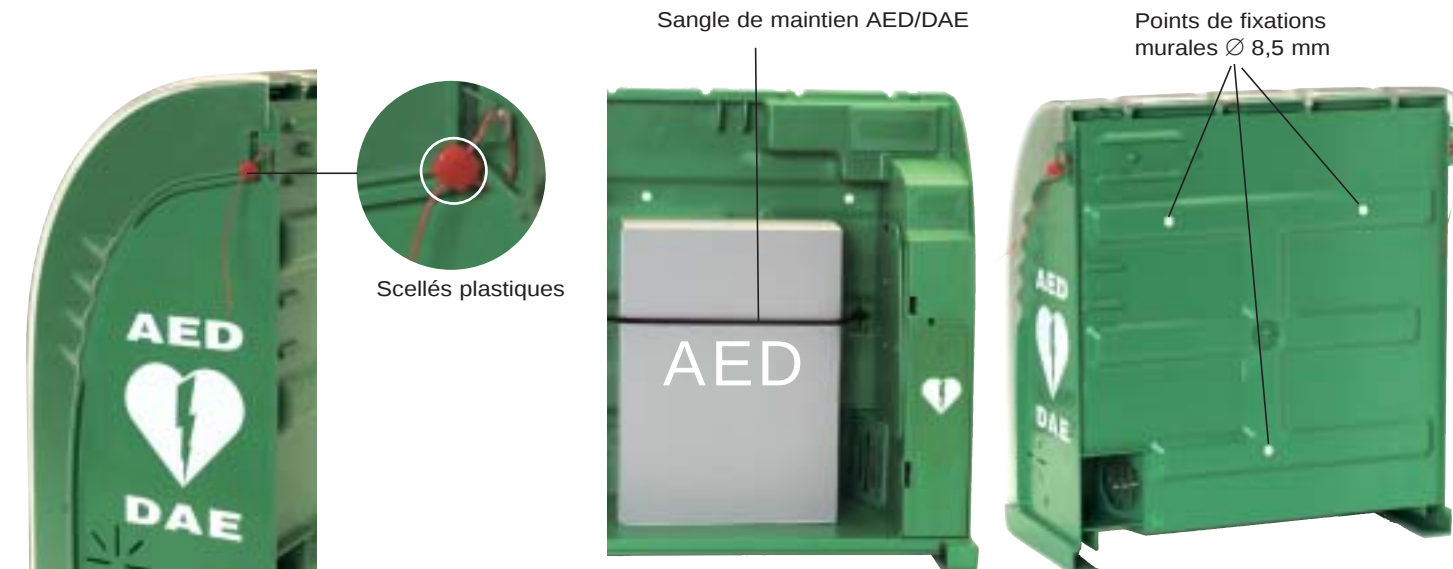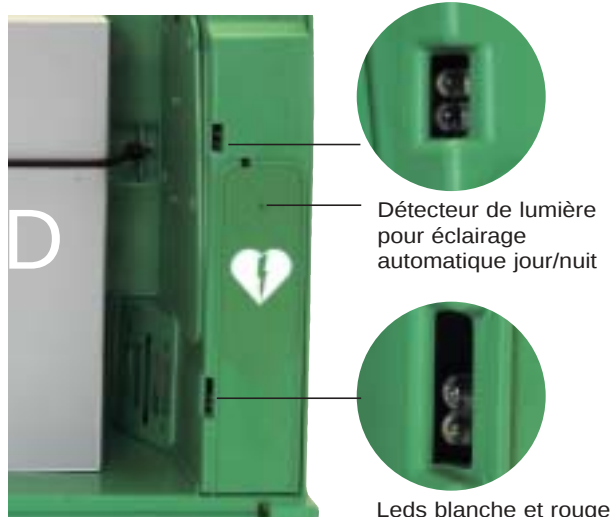

PYRES.COM

Mas des Tilleuls

66680 Canohès - FRANCE

Tél : +33 (0)4 68 68 39 68

Fax : +33 (0)4 68 68 39 69

aivia@pyres.com

www.pyres.com

Produit distribué par :

AIVIA 100